

Lettre de garantie CARDIO LINE 400/400 MED

Lettre de garantie	2
Entretien et maintenance.....	4
Nettoyage	6

Lettre de garantie

Garantie de 2 ans (voir Conditions Générales de Vente point 8.1 Garantie „ERGO-FIT accorde 2 ans de garantie sur ses produits. La première année, les frais de déplacement et le temps de travail en Allemagne sont pris en charge en plus des pièces de rechange. La seconde année, seules les pièces de rechange sont prises en charge. Pour les marchandises commerciales, les dispositions de garantie du fabricant sont applicables)

Le vendeur sera responsable, à l'exclusion d'autres revendications, des défauts de la fourniture ce qui inclut le manque de caractéristiques assurées expressément, comme suit:

1. Toute pièce qui se révèle inutilisable ou dont l'utilisation est restreinte suite à une circonstance qui avait lieu avant le transfert des risques - surtout à cause d'un type de construction défectueux, mauvais matériel de construction ou mauvaise façon - sera réparée ou remplacée pendant une période de 24 mois après la fourniture. Le vendeur décidera lui-même si la pièce concernée sera remplacée ou réparée. Le fournisseur ne sera responsable pour les dessins et matériaux fournis ou choisis que s'il aurait dû reconnaître ces défauts en appliquant de la diligence professionnelle à l'exception où le vendeur a communiqué immédiatement ces défauts à l'acquéreur.
2. Le droit de l'acquéreur de faire valoir des exigences résultantes de défauts s'éteindra dans tous les cas après une durée de 24 mois après le transfert de l'appareil.
3. Aucune garantie n'est assumée pour les dommages étant la conséquence des cas suivants : utilisation inappropriée ou incorrecte, mauvais montage ou mise en marche par l'acquéreur ou un tiers, usure naturelle, traitement inapproprié ou négligent, équipement ou matériel d'échange inappropriés, travaux de construction inadéquates, influences chimiques, électrochimiques ou électriques, pour autant que celles-ci ne sont pas imputables à une faute du vendeur. La fourniture s'effectue au risque de l'acquéreur même en cas d'une fourniture sans frais ex usine.
4. Le vendeur est d'abord autorisé à effectuer trois réfections ou livraisons de remplacement. En cas d'échec, l'acquéreur profitera de droits d'abattement et de rescision dans le cadre des dispositions légales. Pour la réfection, le vendeur profitera d'une durée de six semaines à compter de la réclamation.
5. Des modifications ou réparations inappropriées effectuées par l'acquisiteur ou un tiers sans l'accord préalable du vendeur entraînent l'annulation de tout droit de garantie.
6. Dans le cas où des objets de fourniture sont exportés, la garantie est restreinte à la mise à disposition des pièces de rechange ex usine et sans emballage pendant la période de garantie. L'acquéreur assumera les frais d'emballage, de transport et de rendement de travail. L'acquéreur assumera les frais de déplacement et de rendement de travail dans le cas où l'acquéreur demande un technicien de l'usine ou d'une autre entreprise pour une réparation.

7. Les dispositions légales s'appliquent pour les marchandises qui ne sont pas produites par le vendeur.

Sont exclues des dispositions de garantie les pièces d'usure suivantes:

- ⊗ Courroies de pédale
- ⊗ Guidon
- ⊗ Selle
- ⊗ Courroie dentée
- ⊗ Chaînes
- ⊗ Pédales
- ⊗ Fusibles
- ⊗ Roue libre
- ⊗ Capteur du module SPO₂

Le droit de garantie est annulé dans le cas où les dispositions de maintenance ne sont pas respectées

Maintenance

Tous les appareils utilisés à des fins commerciales doivent être soumis régulièrement à des contrôles de sécurité.

Un entretien régulier et en profondeur et surtout une maintenance qualifiée contribuent à conserver la valeur et à prolonger la durée de vie de votre appareil. Pour cette raison, nous vous recommandons de contrôler votre appareil régulièrement. Une fois par semaine, contrôlez les revêtements, la selle et son guidage, le guidon et les pédales. En cas d'endommagements, faites-les réparer immédiatement. Celle-ci est une condition essentielle pour le maintien de votre droit de garantie. En cas de perturbations, les techniciens et ingénieurs du service clientèle d'ERGO-FIT sont prêts à vous aider.



Avant d'enclencher votre appareil, vérifiez toujours à ce que le câble d'alimentation, la fiche, la prise ou le module d'alimentation ne soient pas endommagés.

Les prochains défauts requièrent une maintenance immédiate:

- ⊗ L'appareil a été soumis à une charge mécanique extrême (choc, câble endommagé et traction inadmissible),
- ⊗ Un liquide a pénétré dans l'appareil,
- ⊗ Un câble, un connecteur ou un revêtement est endommagé,
- ⊗ Un couvercle s'est détaché.

La maintenance d'un appareil peut être effectuée par le service clientèle d'ERGO-FIT. Un contrat de maintenance peut être conclu également.

Entretien et maintenance

Lors de la production de ses appareils de fitness, ERGO-FIT s'efforce à réduire la future maintenance à un minimum.

Quelques-uns des travaux d'entretien et de maintenance sont présentés dans ce qui suit. Effectuez ces travaux régulièrement sur votre appareil.



Avant d'ouvrir ou de chaque travail sur l'appareil, débranchez l'appareil et saisissez la fiche.

Pour les travaux de maintenance, notez que:

- ⊗ l'appareil n'a besoin que d'un entretien minimum.
- ⊗ les pièces mobiles de l'appareil n'ont pas besoin d'être lubrifiées ou graissées.
- ⊗ une fois par semaine, vérifiez que la selle, le guidon, les pédales ou les revêtements ne soient pas cassés.

Manivelle


- ⊗ Comme les vis se desserrent après un certain temps, vérifiez que les manivelles et les pédales sont bien serrées pour la première fois après 3 à 5 heures d'utilisation et après mensuellement. (Pédale droite : filetage à droite, pédale gauche : filetage à gauche).
- ⊗ Si une manivelle se desserre, revissez-la immédiatement. Pour ce faire, enlevez la chape noire de l'arbre-manivelle et resserrez le vis au-dessous à l'aide d'une clé à douille (14 mm / 1/4 de pouce). Pour resserrer les pédales à la manivelle, utilisez une clé ouverte (15 mm.).

Module SPO₂

- ⊗ Cet appareil ne nécessite pratiquement pas de maintenance.

Selle

- ⊗ Vérifiez la présence de la vis de butée sur le dessous du support de la selle et vérifiez qu'elle est bien serrée. En cas d'absence de vis de butée ou si cette dernière est endommagée, mettez l'appareil hors service et faites-le réparer par un personnel qualifié. Autrement, vous risquez de vous blesser.

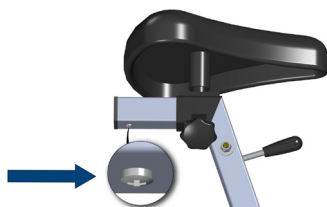

Nettoyage

La sueur, les particules de poussière et la saleté nuisent à votre appareil. Il est possible que cet effet soit visible après quelques semaines déjà. Les surfaces des pièces en métal et aluminium peuvent se détériorer en combinaison avec la sueur. Pour cette raison, veillez à nettoyer votre appareil journalièrement.

Pour cela, nous vous conseillons d'utiliser les désinfectants Ecolab P3-steril ou Scarabig. Vous pouvez les commander auprès des sociétés suivantes:

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Wertstraße 38-42
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
www.ecolab.com

SCARAPHARM chem.-pharm. Produkte GmbH
Wachmannstraße 86
D-28209 Bremen
www.scarapharm.de

Pour nettoyer l'appareil, veillez à ce que:

- ⊗ Veillez à ce que la prise de l'appareil soit débranchée lors du nettoyage.
- ⊗ vous nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon mouillé, un produit doux de nettoyage ou une lessive douce. Puis, séchez-le avec un chiffon doux.
- ⊗ Ne lubrifiez et ne graissez jamais l'extérieur de l'appareil

Nettoyage du clip SPO₂:

Avant de nettoyer le module SPO₂ débranchez-le de la console.

- ⊗ Nettoyez le capteur avec un chiffon doux et humide et un produit nettoyant doux. Le fabricant vous recommande d'utiliser le produit Klenzyme de Steris Corporation.
- ⊗ N'utilisez pas de détergents abrasifs qui risqueraient d'endommager le capteur. Le fabricant vous recommande de désinfecter avec de l'alcool isopropylique (70%) ou avec un désinfectant haut niveau CIDEX OPA de la société Johnson and Johnson Corporation.